

2014年1月15日
株式会社日立リビングサプライ

パワフルで心地よいコードレスタイプの
エアマッサージャー「エアクリエ」3アイテムを発売



株式会社日立リビングサプライ*1(取締役社長:根本 久)は、使用部位別に「ふくらはぎ用」「足用」「手用」の3アイテムを取り揃えた、コードレスタイプのエアマッサージャー「エアクリエ」を2014年2月1日から発売します。

■型式・価格および発売日

品名	型式	色	本体希望小売価格	発売日	当初月産台数
エアマッサージャー 「エアクリエ」 ふくらはぎ用	HK-F100	ワインレッド(R)	オープン価格	2月1日	2,000台
		ブラウン(T)			
エアマッサージャー 「エアクリエ」 足用	HK-F200	ワインレッド(R)	オープン価格	2月1日	2,000台
		ブラウン(T)			
エアマッサージャー 「エアクリエ」 手用	HK-T100	ワインレッド(R)	オープン価格	2月1日	2,000台
		ブラウン(T)			

「エアクリエ」は、「ひきしめ・くつろぎ」の2つのモードごとに、「強・弱」の2段階がそれぞれ選べるエア式のマッサージャーです。複数のエアバッグの同時圧迫による包み込むようなマッサージに加え、交互圧迫による「もみ感」のあるマッサージも行える、パーソナルユース向けながら、しっかりとしたマッサージ機能をもった商品です。さらに、足用(HK-F200)と手用(HK-T100)では、マッサージパッド*2による心地よい刺激もお楽しみいただけます。

「コードレス」タイプであることから、コンセントのある場所に捉われることなく、お好きな場所で快適なマッサージを楽しむことができる*3。うえに、充電電池も使用可能*4。なため、電池の消耗が気になる方にも安心してご利用いただけます。また、内カバーを取り外して洗うことができる「ウォッシュャブル」タイプ*5。のため、清潔な状態でご使用いただけます。

■「エアクリエ」の効果・効能

あんま・マッサージの代用

- 疲労回復
- 血行促進
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のこりをほぐす
- 神経痛、筋肉痛の痛みの緩和

■開発の背景

仕事や家事で忙しい毎日をおくる女性へ向け、美容アイテムを中心としたこれまでのホームエステ製品のラインアップに加え、今回、新しいジャンルの製品である健康アイテムを追加しました。現代女性の抱える手足の疲れやこりといった悩みに焦点をあてたリラックス志向の製品を新たに加えることによりラインアップを拡充し、美容だけではない、女性のニーズに幅広く応える製品の提供をめざします。

- *1 株式会社日立リビングサプライ：日立コンシューマ・マーケティング株式会社の 100%子会社。主な業務は家電製品を中心とした製品の調達、販売。
- *2 マッサージパッドは「HK-F200」(足用)と「HK-T100」(手用)にのみ搭載。
- *3 歩きながらや車の運転をしながらなどのご利用はおやめ下さい。
- *4 単3形アルカリ乾電池4本(別売)、又は単3形充電式ニッケル水素電池4本(別売)がお使いこなれます。
- *5 「内カバー」以外の「エアクリエ」本体を洗うことはできません。

■日立リビングサプライホームページ

<http://www.hitachi-ls.co.jp/>

■お客様からのお問い合わせ先及びカタログ請求先

お客様相談センター 電話：0120-3121-11 (フリーコール)

受付時間：9：00～17：30 (月～土)、9：00～17：00 (日・祝日)【年末年始をのぞく】

■取扱事業部・照会先

株式会社日立リビングサプライ MD 商品本部 最寄・健康家電商品部 ヘルスケアグループ

[担当：反町 奥田]

〒162-0814 東京都新宿区新小川町 6-29 アクロポリス東京

電話：03-3260-9611 (代表)

以上

■エアマッサージャー「エアクリエ」の主な特長


1. エアーバッグ・マッサージパッド・モード

エアーバッグを、ふくらはぎ用は両サイドと後ろの3つ、足用は足裏と両サイドの4つ、手用は上下4つ、と多数配置し、部位全体を包み込むようにマッサージします。また、マッサージパッド(足用・手用のみ*1)で足用は土踏まず、手用は手の平を刺激します。


*1 マッサージパッドは「HK-F200」(足用)と「HK-T100」(手用)にのみ搭載。



[ふくらはぎ用 イメージ図]

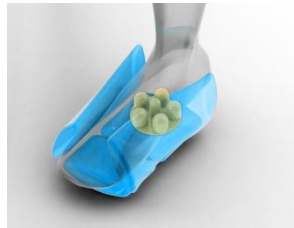


[足用 イメージ図]

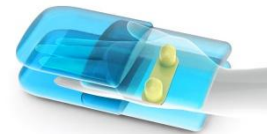


[手用 イメージ図]

さらに、選べる2モードに強弱2段階と4通りの中から、お好みのマッサージが楽しめます。「ひきしめ」モードでは、主に複数のエアーバッグでの同時加圧・開放により、絞り上げを繰り返し、血行を促進します。「くつろぎ」モードでは、主に複数のエアーバッグでの交互加圧・開放により、もみ上げを繰り返し、筋肉のこりをほぐします。

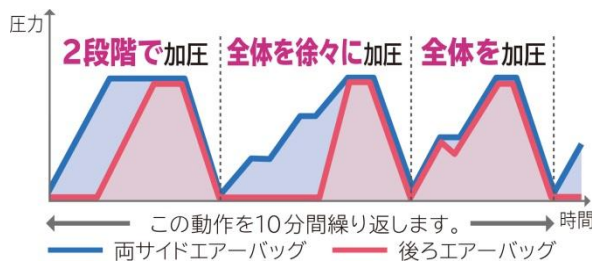

[ひきしめモード動作イメージ (ふくらはぎ用)]

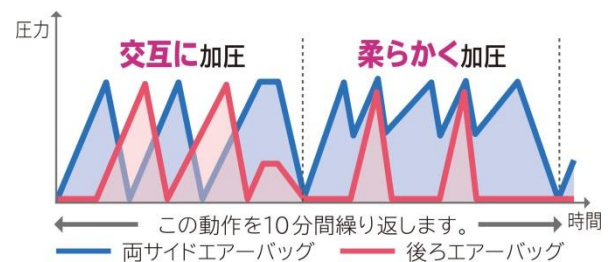

[くつろぎモード動作イメージ (ふくらはぎ用)]

2. コードレス

電池式*2にする事で AC アダプターは不要。わずらわしいコードのないコードレス仕様としました。また、コンパクトにたためるため、付属のポーチに入れて手軽に持ち歩くこともできます。

*2 単3形アルカリ乾電池4本(別売)、又は単3形充電式ニッケル水素電池4本(別売)を使用。

3. ウォッシュャブル(内カバーのみ)

肌に直接ふれる内カバーはファスナーで簡単に取り外して手洗いで、清潔にご使用できます。また、生地はメッシュ生地をしているので、付け心地も快適です。

■主な仕様

型式	HK-F100	HK-F200	HK-T100
色展開	R/T(ワインレッド/ブラウン)		
入数	1個(片足)	1個(片足)	1個(片手)
使用部位	ふくらはぎ	足	手
サイズ(mm)	長さ 530×高さ 180× 厚み 42(面ファスナーを はがして広げた状態)	長さ 400×幅 360× 厚み 42(面ファスナーを はがして広げた状態)	長さ 230×幅 160× 厚み 61
対応サイズ	ふくらはぎ周長 約 29cm～45cm	足サイズ 約 21cm～27cm	手のひらサイズ 約 19cm まで
電源	DC4.8-6.0V 単 3 形アルカリ乾電池 4 本(別売)、 又は単 3 形充電式ニッケル水素電池 4 本(別売)		
電池寿命	約 10 日間(1 回 10 分間、1 日 2 回使用した場合)		
エアー気室数	3	4	4
動作モード	2 種類 (ひきしめモード・くつろぎモード)		
エアー強さ	2 段階 (強・弱)		
カバー着脱	内カバー着脱/手洗い可		
付属品	収納ポーチ		
医療機器分類	管理医療機器		
一般的名称	家庭用エアマッサージ器		
医療機器認証番号	225AKBZX00124000	225AKBZX00125000	225AKBZX00126000
製造販売元	日立マクセル株式会社*3		
販売元	株式会社日立リビングサプライ*4		

*3 日立マクセル株式会社九州マクセル事業本部: 主な業務は、電気かみそり・美容機器・健康機器を中心とした製品の製造。

*4 株式会社日立リビングサプライ: 日立コンシューマ・マーケティング株式会社の 100% 子会社。主な業務は家電製品を中心とした製品の調達、販売。

以上

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
